


Weichgewebemanagement

DEDICAM[®]
DIGITAL CONCEPTS

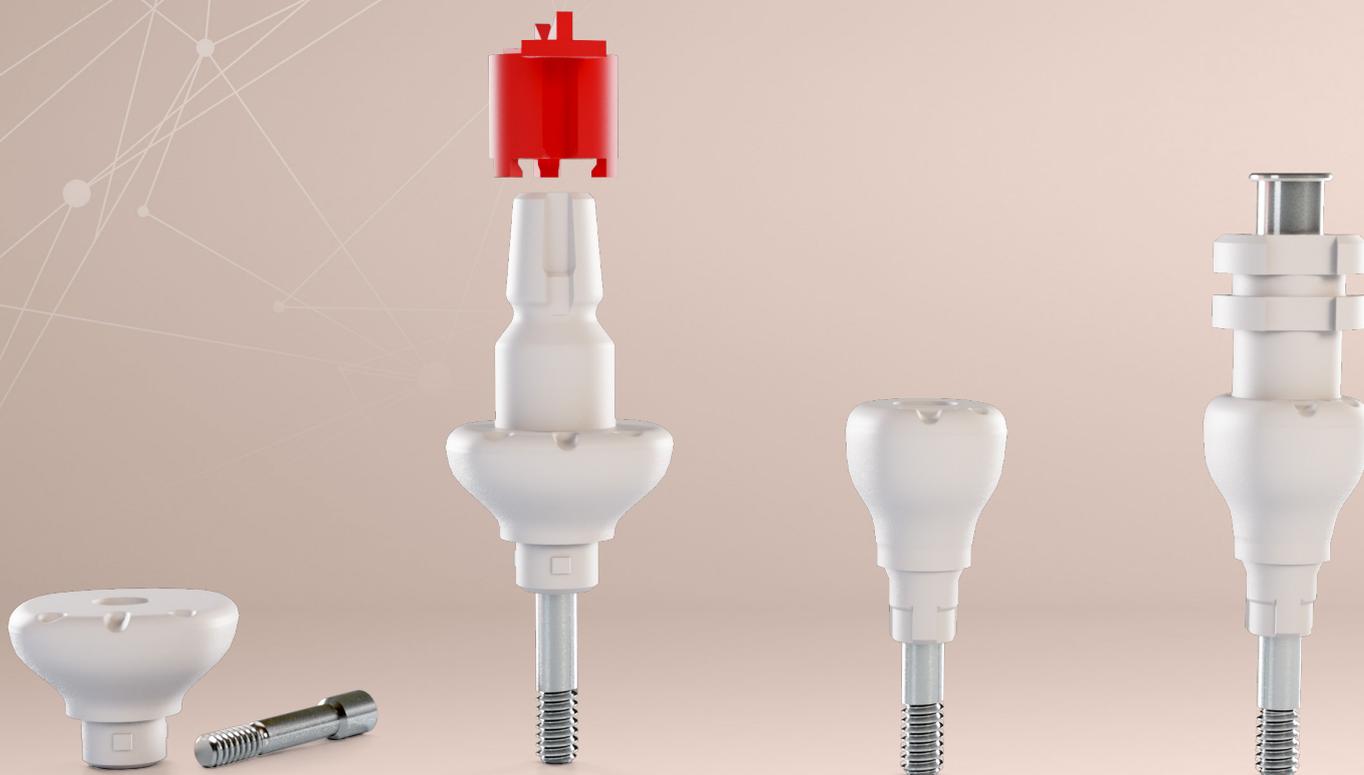

Gingividual[®] Concept *Basic* –
formdefinierte PEEK Gingivaformer
und Abformpfosten

a perfect fit

camlog

Das DEDICAM® Gingividual® Concept – für ein naturkonformes Emergenzprofil

Die Implantatbehandlung soll für die Patienten möglichst komfortabel und effizient ablaufen, und die Versorgung soll dazu beitragen, dass die periimplantären Gewebestrukturen langfristig erhalten bleiben. Das DEDICAM Gingividual Concept schafft hierfür neue Möglichkeiten. Es orientiert sich am anatomischen Vorbild der Natur und bietet einen effizienten Workflow über unterschiedliche Wege, je nach Anwenderpräferenz und Infrastruktur des behandelnden Teams.

Das DEDICAM Gingividual Concept gibt es in zwei Varianten:

- **Gingividual Concept Pro:** Individuelle PEEK Gingivaformer und Abformpfosten für patientenspezifische Versorgungen.
- **Gingividual Concept Basic:** Präfabrizierte PEEK Gingivaformer und Abformpfosten in acht vordefinierten Zahnformen.

Mit Gingivaformern aus dem gewebefreundlichen Material PEEK¹⁻³ kann das periimplantäre Weichgewebe ausgeformt bzw. gestützt und bei der Abformung mit den im subgingivalen Bereich baugleichen PEEK Abformpfosten übertragen werden. Die Gingivaformer sind einzeln oder zusammen sowohl mit einem offenen oder auch geschlossenen Abformpfosten bestellbar.

Die Produkte werden mit den Implantatanschlussgeometrien für die CAMLOG®, CONELOG® und iSy® Implantate angeboten und unsteril ausgeliefert. Sie sind sterilisierbar, nicht röntgenopak und für 180 Tage in situ zugelassen.

¹ PEEK Biomaterials Handbook Chapter 8- Biocompatibility of PEEK Polymers. Jeffrey M. Toth BSE, PH.D., FAIMBE 2019

² Data on file at Invisio Biomaterial Solutions™

³ Rosentritt M, Ilie N, Lohbauer U, Hrsg. Werkstoffkunde in der Zahnmedizin. Moderne Materialien und Technologien. Thieme; 2018

Das Gingividual Concept Basic

Formdefinierter PEEK Gingivaformer

Weichgewebe-Ausformung

- Ausformung bzw. Stützung des Weichgewebes von Anfang an

Formoptionen

- Eine Auswahl an acht vordefinierten Zahnformen in jeweils zwei Gingivahöhen stehen zur Verfügung, um auf die jeweilige Mundsituation einzugehen



Okklusale Scan-Markierung

- Möglichkeit des intraoralen Scannens der Gingivaformer und entsprechendes Matching mit Hilfe der passenden CAD-Bibliothek in der Designsoftware: www.camlog.at/cad-bibliotheken

Bukkale Markierung

- Zur einfachen Orientierung der Produkte im Mund (Ausrichtung zur Implantatinnengeometrie) ist eine kleine Vertiefung angebracht

Formkongruenter PEEK Abformpfosten

Weichgewebe-Abformung

- Einem Kollabieren des Weichgewebes und zusätzlicher Gewebemanipulation wird vorgebeugt
- Übertragung der Implantatposition und des anatomisch geformten Emergenzprofils


Bekanntes und bewährtes Handling

- Analog zu den Standardabformpfosten „offene und geschlossene Löffeltechnik“
- Repositionskappe analog zu den Standardabformpfosten „geschlossener Löffel“



Eine Auswahl an spezifischen Zahnformen für Gingivaformer und Abformpfosten

Alle Formen sind jeweils in den Gingivahöhen 4 mm und 6 mm verfügbar!

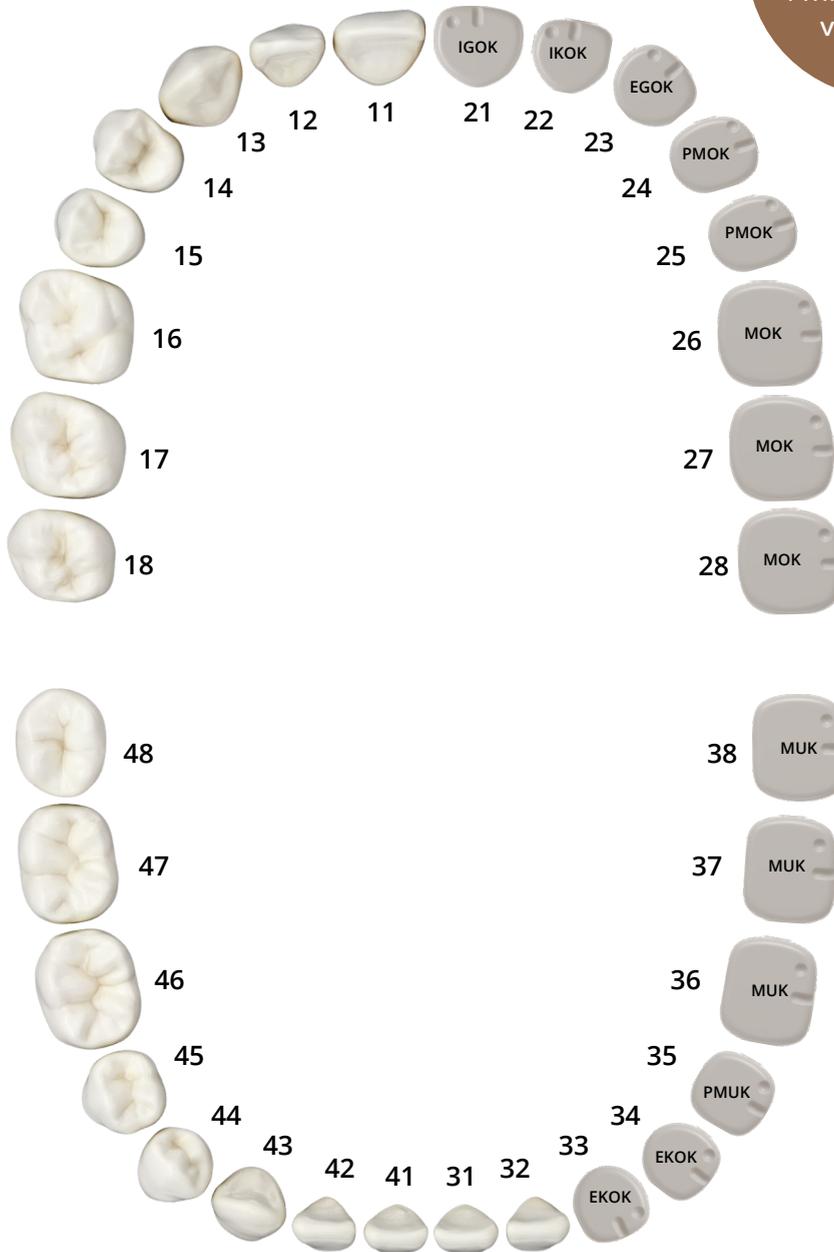

- | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|--|
| IGOK Inzisivi, <i>groß</i> – OK | | PMOK Prämolaren – OK | |
| IKOK Inzisivi, <i>klein</i> – OK | | PMUK Prämolaren – UK | |
| EGOK Eckzahn, <i>groß</i> – OK | | MOK Molar – OK | |
| EKOK Eckzahn, <i>klein</i> – OK | | MUK Molar – UK | |



Jetzt bequem über das **DEDICAM Auftragsformular** bestellen.
alltecdental.at/dedicam-auftragsblatt

Distributor

ALLTEC Dental GmbH | Schwefel 93 | 6850 Dornbirn | Österreich
Telefon +43 5572 372341 | Fax +43 5572 372341-404 | info@alltecdental.at | www.alltecdental.at

Kundenservice

Telefon 07044 9445-100 | Fax 0800 9445-000 | dedicam.cad@camlog.com

Headquarters

CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Basel | Schweiz
Telefon +41 61 565 41 00 | Fax +41 61 565 41 01 | info@camlog.com | www.biohorizonscamlog.com

Wenn nichts anderes vermerkt ist, sind alle Produktnamen unabhängig davon, ob diese in Grossbuchstaben gedruckt oder mit dem Markenzeichen-Symbol versehen sind, Markenzeichen der BioHorizons Inc. oder der CAMLOG Biotechnologies GmbH, ihrer Tochtergesellschaften, verbundener Gesellschaften, oder ihrer Lizenzgeber.

Hersteller aller DEDICAM® Produkte: ALTATEC GmbH | Maybachstr. 5 | 71299 Wimsheim | Deutschland
und Biotech Dental Digital SAS | 305 Allées de Craponne | 13300 Salon de Provence | France

Inspiring excellence in oral reconstruction

